

PF7+

Riempitrice peristaltica PF7

Flexicon
Liquid Filling

Caratteristiche e vantaggi


- Riempimento di precisione di micro-volumi
- Precisione di riempimento ripetibile superiore a $\pm 0,5\%$ per evitare costosi sprechi dovuti al riempimento eccessivo
- Nessuna formazione di schiuma, spruzzi o gocciolamento tra i cicli di riempimento
- Ricette programmabili dall'utente che ha la possibilità di definire i parametri di riempimento
- Superfici facili da pulire, prive di zone di intrappolamento e caratterizzate da un design ergonomico per il funzionamento sul banco, in armadi di biosicurezza (BSC) e unità LAF
- Display a colori chiaro e intuitivo dotato di tastiera con tasti di grandi dimensioni, per un facile uso anche quando si indossano gli indumenti protettivi previsti per gli ambienti sterili
- Rilascio della documentazione di qualifica IQ/OQ disponibile su richiesta
- Garanzia di 5 anni



Prestazioni PF7+

Prestazioni		
Volume di riempimento / ml	Diametro interno / mm (in)	Tempo di riempimento tipico / s
0,2	0,5 (1/32)	0,75
1,0	0,8 (1/16)	1,10
1,4	1,2 (1/8)	0,75
1,8	1,6 (1/4)	0,60
8,0	3,2 (1/8)	0,70
15,0	4,8 (3/16)	0,80
24,0	6,0 (1/4)	0,80
50,0	8,0 (5/16)	0,80

PF7 – capacity diagram (based on water)

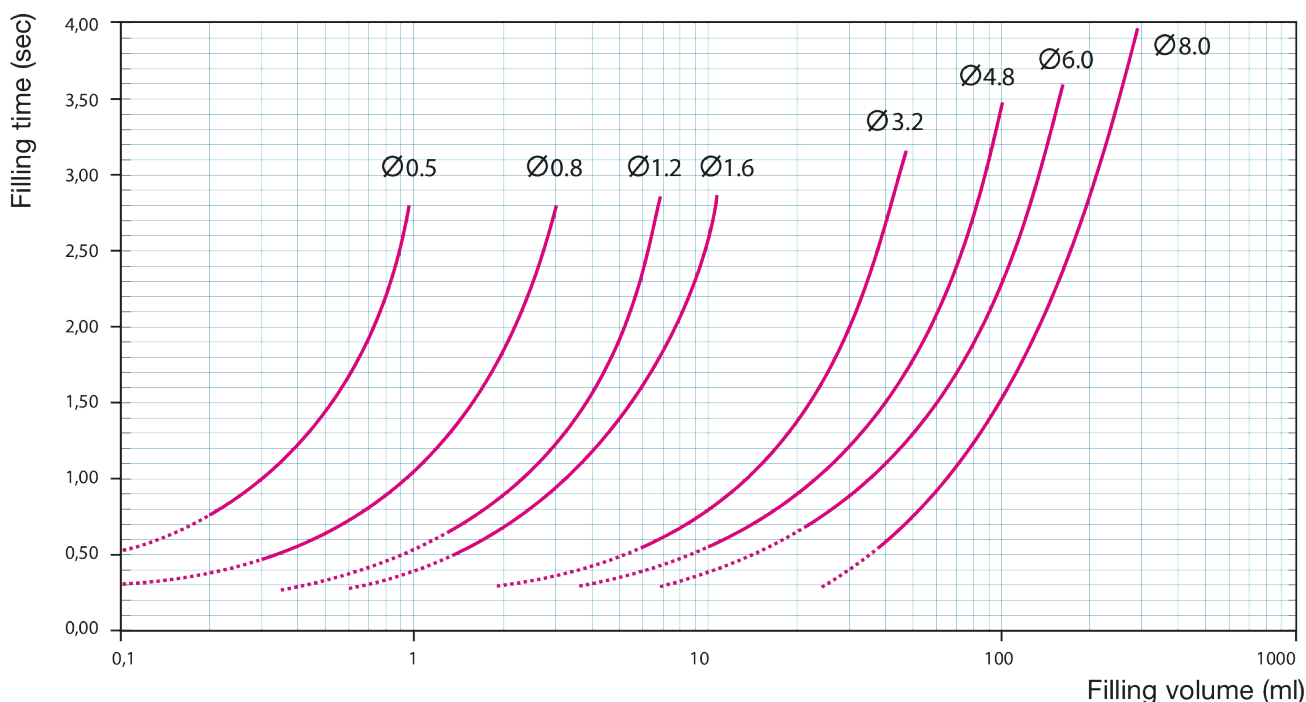




Specifiche tecniche

	PF7+
Precisione	Migliore di $\pm 0,5\%$
Classe di protezione	IP32, NEMA 2
Gamma di temperatura di esercizio	5 a 40°C °C
Gamma di temperatura di esercizio	41 a 104 °F °F
Rapporto di comando della velocità	570:1
Umidità	80% (senza condensa) fino a 31 °C (88 °F), con diminuzione lineare fino al 50% a 40 °C (104 °F)
Rumorosità	<70 db(A) a 1 m
Norme	CAN/CSA C22.2 N. 61010-1, CE, cETLus, UL 61010-1
Alimentazione	50/60 Hz, Filtrato 100-120 V/200-240 V, Monofase
Potenza assorbita	140 VA
Peso	12.5 kg
Peso	27.6 lb
Corrente a pieno carico	<0,6 A a 230 V, <1,25 A a 115 V
Amperaggio del fusibile	2.5 ampere
Accessori	Interruttore a pedale, supporto di riempimento, kit di riempimento avanzato (AFK)
Dimensioni tubo compatibili	Diam. int. 0,5-8,0 mm

Materiali di costruzione

	PF7+
Alloggiamento	Alluminio anodizzato, Plastica ABS
Tastiera/interfaccia operatore	Policarbonato, Poliestere
Gruppo del rullo testa	Acciaio inox 316
Coperchio	Alluminio anodizzato EN AW-5754

Dimensioni PF7+

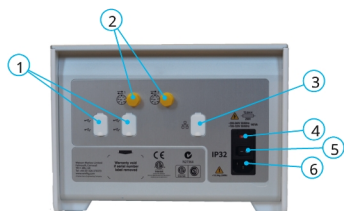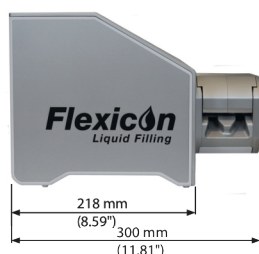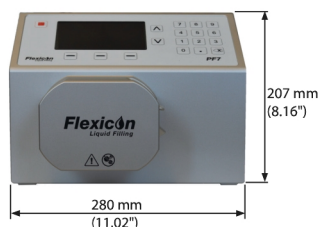

Pannello posteriore	
Caratteristica	Descrizione
1	USB 2.0
2	Connettori M12
3	RJ45 10/100 Mbps (solo per l'esportazione dalla pompa, non per funzioni di comando. Non progettata per essere utilizzata con Ethernet/IP™. Non progettata per essere utilizzata con PROFINET)
4	Selettore di tensione
5	Interruttore di alimentazione
6	Presca di alimentazione

Codici prodotto

Codici prodotto pompa	
Descrizione	Codice componente
Riempitrice peristaltica PF7+	91-068-14X*
Interruttore a pedale PF7+/PF7	88-210-040
Supporto di riempimento PF7+	88-200-200
Protocollo IQ/OQ PF7+ per 1 unità	74-156-440
Esecuzione prot. IQ/OQ PF7+	74-156-441
IQ/OQ PF7+ per unità aggiuntive	74-156-442
PF7/QC14	91-060-14X
PF7/QC12	91-060-00X
Supporto di riempimento PF7	81-100-200
Protocollo IQOQ PF7	74-156-443
Esecuzione prot. IQOQ PF7	74-156-444
FlexFeed 15	92-160-000
FlexFeed 20	92-170-000
FlexFeed 30	Contattare l'ufficio vendite di zona
Kit di riempimento avanzato (fino a flaconi 30R)	88-208-00X*
Kit di riempimento avanzato (flaconi 50R-100R)	88-208-22X*
Tastiera wireless per ambienti sterili	88-100-001
Componenti sostituibili sul campo	
Testa QC14 per PF7+/PF7	87-068-000
Ponte passacavi QC14 per PF7+/PF7	87-068-047
Set blocco tubo completo QC14	87-068-500
Vassoio di accesso di ricambio QC14	87-068-055
Richiede il set di piatti di pesatura per il kit di riempimento avanzato	87-208-001

*Opzioni cavo di alimentazione	
U:	Presa di rete inglese
E:	Presa di rete UE
A:	Presa di rete America
K:	Presa di rete Australia
R:	Presa di rete Argentina
C:	Presa di rete Svizzera
D:	Presa di rete India/Sudafrica
B:	Presa di rete Brasile
J:	Presa di rete Israele

Codici per l'ordinazione dei tubi Accusil vulcanizzati al platino			
Diametro interno / mm (in)	Parete / mm (in)	Lunghezza / m (ft)	Codice componente
0,5 (1/16)	1,6 (1/16)	10 (32,8)	84-103-005
		150 (492,1)	84-104-005
0,8 (1/8)	1,6 (1/16)	10 (32,8)	84-103-008
		150 (492,1)	84-104-008
1,2 (1/4)	1,6 (1/16)	10 (32,8)	84-103-012
		150 (492,1)	84-104-012
1,6 (1/4)	1,6 (1/16)	10 (32,8)	84-103-016
		150 (492,1)	84-104-016
3,2 (1/2)	1,8 (1/16)	10 (32,8)	84-103-032
		150 (492,1)	84-104-032
4,8 (3/8)	2,0 (5/16)	10 (32,8)	84-103-048
		125 (410,1)	84-104-048
6,0 (1/2)	2,1 (5/16)	10 (32,8)	84-103-060
		90 (290,3)	84-104-060
8,0 (3/4)	2,2 (7/16)	10 (32,8)	84-103-080
		65 (213,2)	84-104-080

Disclaimer: Le informazioni contenute in questo documento sono ritenute corrette al momento della pubblicazione. Tuttavia, Watson-Marlow Flexicon A/S declina ogni responsabilità per eventuali errori in esso contenuti e si riserva il diritto di apportarvi modifiche senza preavviso. AVVERTENZA: Questi prodotti non sono stati progettati per l'utilizzo in applicazioni di tipo medicale e, pertanto, non devono essere usati per tali applicazioni. asepticus e Accusil sono marchi registrati.

wmfts.com/global



26 July 2023