# Acionamento 323 com cabeçote MC4



Bomba encapsulada série 300

#### Recursos e benefícios

- Comandos de controlo manual ou remoto de 4-20 mA ou automático analógico de 0-10 V ou RS232
- Controlo manual de velocidade digital melhorado até 133:1
- O bloqueio do teclado evita adulteração ou alterações acidentais
- Recurso MemoDose para dosagem precisa de um único disparo
- Entradas digitais TTL para funcionamento/paragem e direção
- Reversível instantaneamente
- Garantia de dois anos



# CE

#### Desempenho do Acionamento 323 com cabeçote MC4

Cabeçotes pa	Cabeçotes para microcassete MC4 com quatro roletes e cinco canais —Diâmetro do tubo e caudais (ml/min)									
Códigos das mangueiras	II arania/Preto	Laranja/ Vermelho	Laranja/ Azul	Laranja/Verde	Laranja/ Amarelo	Laranja/Branco	Preto/Preto	Laranja/Laranja	Branco/Branco	Vermelho/ Vermelho
Diâmetro interno mm	0,13	0,19	0,25	0,38	0,50	0,63	0,76	0,88	1,02	1,14
3,0 rpm	0,002	0,01	0,01	0,03	0,05	0,08	0,13	0,17	0,22	0,27
110 rpm	0,09	0,3	0,5	0,9	1,7	3,1	4,6	6,4	8,1	9,9
Código da mangueira		Amarelo/ Amarelo	Amarelo/ Azul	Azul/ Azul	Verde/Verde	Roxo/ Roxo	Roxo/Preto	Roxo/Laranja	Roxo/Branco	
Diâmetro interno mm	1,29	1,42	1,52	1,65	1,85	2,05	2,29	2,54	2,79	
3,0 rpm	0,35	0,46	0,52	0,60	0,76	0,90	1,1	1,3	1,4	
110 rpm	13	17	19	22	28	33	40	47	53	

### Especificações técnicas

	Acionamento 323 com cabeçote MC4		
Número de roletes do cabeçote	4		
Número de canais do cabeçote	5		
Caudal máx	53 ml/min		
Caudal mín.	0.002 ml/min		
Rácio do controlo de velocidade	133:1		
Velocidade máx. de operação	400 rpm		
Velocidade mín. de operação	3 rpm		
Faixa de temperatura de funcionamento	5 – 40 °C		
Faixa de temperatura de funcionamento	40 - 104 °F		
Peso	5 kg		
Peso	11 lb		
Opções para controlo do acionamento	Du, S		
Normas para o acionamento	CE, cETLus		
Classificação de entrada do acionamento	IP31		
Humidade no acionamento	80 % até 31 °C, 88 °F, diminuindo linearmente para 50 % a 40 °C, 104 °F		
Ruído do acionamento	<70dB(A) a 1m		
Altitude máx.	2000		
Alimentação de energia ao acionamento	Monofásica, 100-120 V, 220-240 V 50/60 Hz, 100 VA		
Diâmetros interiores das mangueiras compatíveis	0.13, 0.19, 0.25, 0.38, 0.5, 0.63, 0.76, 0.88, 1.02, 1.14, 1.29, 1.42, 1.52, 1.65, 1.85, 2.05, 2.29, 2.54, 2.79 mm		


# Materiais de construção

	Acionamento 323 com cabeçote MC4		
Rolamentos	Aço carbono		
Carcaça do acionamento	ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno), Alumínio revestido com pó LM24		
Conjunto da placa de montagem	IXEF (Poliarilamida), Nylon preenchido com fibra de vidro		
Fusos	Aço inoxidável		

As informações listadas abrangem a gama completa.

Para obter especificações detalhadas de modelos/componentes individuais, consulte o manual do utilizador ou entre em contacto com o representante da WMFTS.

# Dimensões do Acionamento 323 com cabeçote MC4

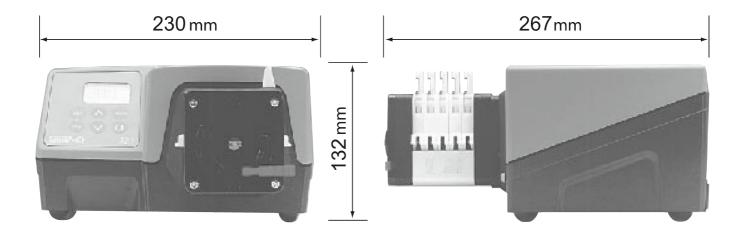

#### Opções de controlo

Funcionalidade		323E	3235	323U	323Du		
Controlo manual							
Controlo de velocidade pelo teclado		✓	✓	✓	<b>√</b>		
15-400 rpm, controlo de velocidade 27:1		✓					
3-400 rpm, controlo de velocidade 133:1			✓	✓	✓		
1,5-220rpm controlo de velocidade 147:1			✓	✓	<b>√</b>		
MemoDose para dosagem precisa com um único disparo			<b>~</b>	✓	<b>✓</b>		
Controlo remoto							
Funcionamento/paragem, mudança de direção através do fecho de contacto ou TTL de 5 V				✓	✓		
Funcionamento remoto do MemoDose (interruptor/pedal)				✓	✓		
Controlo analógico da velocidade							
Entradas; 0-10V ou 4-20mA				✓	✓		
Comunicação digital RS232							
Controlo série digital					✓		
Segurança	_						
Bloqueio do teclado para proteção da configuração			✓	<b>√</b>	✓		

#### Códigos dos produtos

Códigos de produto das unidades e cabeçotes					
Descrição N° de peça					
3235	apenas acionamento	036.3134.000*			
323Du	apenas acionamento	036.3154.000*			
314MC	cabeçote de cinco canais com quatro roletes	033.6453.000			
314MCX	cabeçote de extensão de cinco canais com quatro roletes	033.6454.000			

<sup>\*</sup>Substitua o último 0 por A, E ou U para a rede elétrica americana, europeia ou do Reino Unido (americana 110V 1 fase 60Hz)

Códigos das mangueiras						
Código de cores	Mangueira (mm)	Marprene*	PVC	Silicone		
Laranja / preto	0,13		981.0013.000			
Laranja/vermelho	0,19		981.0019.000			
Laranja / azul	0,25	979.0025.000	981.0025.000			
Laranja/verde	0,38	979.0038.000	981.0038.000			
Laranja/amarelo	0,50	979.0050.000	981.0050.000			
Laranja/branco	0,63	979.0063.000	981.0063.000	983.0063.000		
Preto / preto	0,76	979.0076.000	981.0076.000	983.0076.000		
Laranja/laranja	0,88	979.0088.000	981.0088.000	983.0088.000		
Branco / branco	1,02	979.0102.000	981.0102.000	983.0102.000		
Vermelho / vermelho	1,14	979.0114.000	981.0114.000	983.0114.000		
Cinzento / cinzento	1,29	979.0129.000	981.0129.000	983.0129.000		
Amarelo / amarelo	1,42	979.0142.000	981.0142.000	983.0142.000		
Amarelo / azul	1,52	979.0152.000	981.0152.000	983.0152.000		
Azul / azul	1,65	979.0165.000	981.0165.000	983.0165.000		
Verde / verde	1,85	979.0185.000	981.0185.000	983.0185.000		
Roxo/roxo	2,05	979.0205.000	981.0205.000	983.0205.000		
Púrpura/preto	2,29	979.0229.000	981.0229.000	983.0229.000		
Roxo/laranja	2,54	979.0254.000	981.0254.000	983.0254.000		
Roxo/branco	2,79	979.0279.000	981.0279.000	983.0279.000		

<sup>\*</sup>Para mangueira Marprene para autoclave, substitua o último "0" por "\*" - por exemplo 979.0238.00\*

Isenção de responsabilidade: Todos os caudais mostrados foram obtidos bombeando água a 20 °C (68 °F) com sucção e alturas manométricas de descarga zero. As informações contidas neste documento são consideradas corretas, porém a Watson-Marlow Limited não se responsabiliza por nenhum erro que este documento possa conter e reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. É responsabilidade dos utilizadores garantirem a adequação do produto para utilização nas suas aplicações. Watson-Marlow, LoadSure, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene, Marprene são marcas comerciais registadas da Watson-Marlow Limited. Tri-Clamp é uma marca comercial registada da Alfa Laval Corporate AB. GORE e STA-PURE são marcas comerciais registradas da W.L. Gore and Associates. Indique sempre o código do produto ao encomendar bombas e mangueiras.

wmfts.com/global



08 August 2023