

MC8ポンプヘッド搭載 323ドライブ

300 シリーズチューブポンプ

機能と利点

- 手動またはリモートでの 4-20 mA または 0-10 V アナログ自動制御または RS232 制御コマンド
- 最大 133:1 のデジタルマニュアルスピードコントロール
- キーパッドロックにより、改ざんや偶発的な変更を防止します
- MemoDose 機能により、正確なシングルショット注入が可能
- ラン / ストップおよび方向のデジタル TTL 入力
- 瞬時に回復可能
- 2 年間の保証



MC8ポンプヘッド搭載323ドライブ 性能

MC8 8 ロール 5 チャンネル低流量マイクロカセットのピンパッド - チューブ口径および流量 (ml/ 分)											
	チューブコード	オレンジ / 黒	オレンジ / 赤	オレンジ / 青	オレンジ / 緑	オレンジ / 黄	オレンジ / 白	黒 / 黒	オレンジ / オレンジ	白 / 白	赤 / 赤
	内径 (mm)	0.13	0.19	0.25	0.38	0.50	0.63	0.76	0.88	1.02	1.14
323Du/MC8	3.0 rpm	0.002	0.01	0.01	0.02	0.04	0.07	0.11	0.14	0.18	0.24
	110 rpm	0.09	0.3	0.5	0.8	1.4	2.6	3.9	5.3	6.6	8.8
323S/D	3.0 rpm	0.002	0.01	0.01	0.03	0.05	0.08	0.13	0.17	0.22	0.27
	110 rpm	0.09	0.3	0.5	0.9	1.7	3.1	4.6	6.4	8.1	9.9
	チューブコード	グレー / グレー	黄 / 黄	黄 / 青	青 / 青	緑 / 緑	紫 / 紫	紫 / 黒	紫 / オレンジ	紫 / 白	
	内径 (mm)	1.29	1.42	1.52	1.65	1.85	2.05	2.29	2.54	2.79	
323Du/MC8	3.0 rpm	0.27	0.33	0.38	0.46	0.55	0.65	0.79	0.90	0.98	
	110 rpm	10	12	14	17	20	24	29	33	36	
323S/D	3.0 rpm	0.35	0.46	0.52	0.60	0.76	0.90	1.1	1.3	1.4	
	110 rpm	10	12	14	17	20	24	29	33	36	

技術仕様

	MC8ポンプヘッド搭載323ドライブ
ポンプヘッドのローラー数	8
ポンプヘッド チャンネル数	5
最大流量	53 ml/min
最小流量	0.002 ml/min
速度制御比	133:1
最大動作速度	400 rpm
最小動作速度	3 rpm
動作温度範囲	5 宛先 40°C °C
動作温度範囲	40 宛先 104 °F °F
重さ	5 kg
重さ	11 lbs
ドライブコントロールオプション	Du, S
ドライブ規格	CE, cETLus
ドライブの入力定格	IP31
ドライブの湿度	最大31 °C,88 °F,で80 %、40 °C,104 °F,で50 %まで直線的に減少
ドライブの異音	1mで70dB (A) 未満
最大高度	2000
ドライブの電源装置	1Ph、100-120 V、220-240 V 50/60 Hz、100 VA
互換性のあるチューブポアサイズ	0.13, 0.19, 0.25, 0.38, 0.5, 0.63, 0.76, 0.88, 1.02, 1.14, 1.29, 1.42, 1.52, 1.65, 1.85, 2.05, 2.29, 2.54, 2.79 mm


構成材質

	MC8ポンプヘッド搭載323ドライブ
ベアリング	炭素鋼
ドライブケースワーク	ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン), 粉体塗装アルミニウムLM24
マウンティングプレートアセンブリ	IXEF (ポリアリールアミド), ガラス繊維入りナイロン
スピンドル	ステンレス鋼

ここに記載されている情報は、すべての範囲を網羅しています。

個々のモデル / コンポーネントの詳細な仕様については、ユーザーマニュアルを参照するか、WMFTS セールスエンジニアにお問い合わせください。

MC8ポンプヘッド搭載323ドライブ寸法

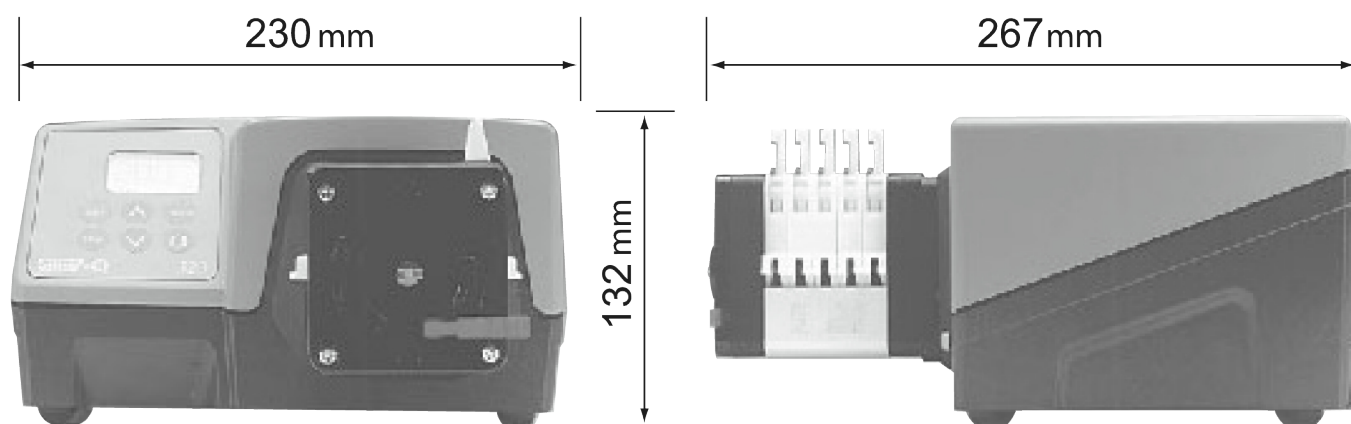

制御オプション

機能	323E	323S	323U	323Du
手動制御				
キーボードスピードコントロール	✓	✓	✓	✓
15~400rpm 27 : 1 スピードコントロール	✓			
3~400rpm 133 : 1 スピードコントロール		✓	✓	✓
1.5~220rpm 147 : 1 スピードコントロール		✓	✓	✓
MemoDose により、正確なシングルショット注入を実現		✓	✓	✓
遠隔制御				
ラン / ストップ、コンタクトクローザまたは 5V TTL による方向変更			✓	✓
MemoDose のリモート操作 (ハンド / フットスイッチ)			✓	✓
アナログ速度制御				
入力 : 0 ~ 10V または 4 ~ 20mA			✓	✓
RS232 デジタル通信				
デジタルシリアルコントロール				✓
セキュリティ				
設定を固定するキーボードロック		✓	✓	✓

製品コード

ドライブおよびポンプヘッド 製品コード		
説明		部品コード
323S	ドライブのみ	036.3134.000*
318MC	8 ロータ 5 チャンネルポンプヘッド	033.6853.000
318MCX	8 ロータ 5 チャンネルエクステンション ポンプヘッド	033.6854.000
323Du	ドライブのみ	036.3154.000*

* 米国、欧州、または英国の主電源の場合は、最後の 0 を A、E、または U に交換します (米国 110 V 1 PH 60 Hz)。

チューブ製品コード				
色コード	チューブ (mm)	Marprene (マーブレン) *	PVC	Silicone
オレンジ/黒	0.13		981.0013.000	
オレンジ / 赤	0.19		981.0019.000	
オレンジ/青	0.25	979.0025.000	981.0025.000	
オレンジ/緑	0.38	979.0038.000	981.0038.000	
オレンジ/黄	0.50	979.0050.000	981.0050.000	
オレンジ/白	0.63	979.0063.000	981.0063.000	983.0063.000
黒/黒	0.76	979.0076.000	981.0076.000	983.0076.000
オレンジ/オレンジ	0.88	979.0088.000	981.0088.000	983.0088.000
白/白	1.02	979.0102.000	981.0102.000	983.0102.000
赤/赤	1.14	979.0114.000	981.0114.000	983.0114.000
グレー/グレー	1.29	979.0129.000	981.0129.000	983.0129.000
黄/黄	1.42	979.0142.000	981.0142.000	983.0142.000
黄/青	1.52	979.0152.000	981.0152.000	983.0152.000
青/青	1.65	979.0165.000	981.0165.000	983.0165.000
緑/緑	1.85	979.0185.000	981.0185.000	983.0185.000
紫/紫	2.05	979.0205.000	981.0205.000	983.0205.000
紫/黒	2.29	979.0229.000	981.0229.000	983.0229.000
紫/オレンジ	2.54	979.0254.000	981.0254.000	983.0254.000
紫/白	2.79	979.0279.000	981.0279.000	983.0279.000

* オートクレーブ可能な Marprene チューブの場合は、最後の「0」を「*」に交換してください (例 : 979.0238.00 *)

免責条項: 表示されている流量はすべて、吸引ヘッドおよびデリバリーヘッドがゼロの状態での状態で 20 °C (68 ° F) で水を移送した場合のもので、本書に記載されている情報は正確であると考えられますが、Watson-Marlow Limitedは、誤りがあった場合でも一切の責任を負いません。また、予告なしに仕様を変更する権利を有します。用途内での製品利用の適性を確認するのはユーザーの責任です。Watson-Marlow、LoadSure、Pumpsil、PureWeld XL、Bioprene、Marpreneは、Watson-Marlow Limitedの登録商標です。Tri-ClampはAlfa Laval Corporate ABの登録商標です。GOREおよびSTA-PUREはW.L.Gore and Associatesの登録商標です。ポンプおよびチューブをご注文の際は、製品コードをお申しつけください。

wmfts.com/global



07 August 2023